

# pts connect™ dock



## Guía de usuario

### Uso previsto

El sistema de acoplamiento PTS Connect™ está concebido para ser utilizado por profesionales. El sistema de acoplamiento PTS Connect permite que el sistema A1CNow® y los analizadores PTS Detect™ transfieran el resultado de la prueba más reciente a un ordenador conectado.

### Requisitos de hardware

Elementos incluidos:

- Acoplador PTS Connect
- Adaptador serie de USB a RS232 (adaptador)
- Cable de USB a USB

Elementos necesarios que no se incluyen:

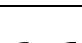
- Ordenador con puerto USB

### Funcionamiento

Siga estos pasos para transmitir el resultado de la prueba más reciente del analizador a un

ordenador equipado con un puerto USB disponible:

1. Conecte el conector macho de 9 clavijas del adaptador suministrado al conector hembra de 9 clavijas del acoplador PTS Connect.
2. Conecte un extremo del conector USB del cable suministrado al acoplador y el otro extremo a un puerto disponible del ordenador.
3. Ejecute una aplicación que capture los resultados del acoplador PTS.
4. Ejecute una prueba en un analizador A1CNow o en un analizador PTS Detect.
5. Una vez que haya finalizado la prueba y el resultado aparezca en pantalla, extraiga el cartucho de prueba del analizador.
6. Coloque el analizador en la base del acoplador PTS Connect y presiónelo hacia abajo cuando esté listo para descargar datos.
7. El analizador mostrará la palabra "DOCK" (ACOPLADOR) y se transferirá el resultado a la aplicación.
8. Extraiga el analizador del acoplador PTS Connect.
9. El acoplador PTS Connect está listo para transferir el resultado de la siguiente prueba.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS	
	NÚMERO DE CATÁLOGO
	CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE USO
	REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA COMUNIDAD EUROPEA
	NÚMERO DE LOTE
	FABRICANTE
	ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 98/79/CE SOBRE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO.
	RECOLECCIÓN APARTE: LAS BATERÍAS DEBEN DESECHARSE CONFORME A LAS LEYES DE SU PAÍS. COMUNÍQUESE CON SU ADMINISTRACIÓN LOCAL CORRESPONDIENTE PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS LEYES RELEVANTES RESPECTO AL DESECHO Y AL RECICLAJE EN SU ÁREA.



Polymer Technology Systems, Inc.  
7736 Zionsville Road  
Indianápolis, IN 46268 EE. UU.

**Solicitud de asistencia relacionada con el acoplador PTS Connect™:**

Llame al servicio de atención al cliente de PTS Diagnostics:

1-877-870-5610 (llamada gratuita desde EE. UU.)

+1-317-870-5610 (teléfono directo) +1-317-870-5608 (fax)

Correo electrónico: [inforequest@ptsdiagnostics.com](mailto:inforequest@ptsdiagnostics.com)

Sitio web: [www.ptsdiagnostics.com](http://www.ptsdiagnostics.com)

PN 91180 ES



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany